




Komfort sammenleggbar krakk - Brukerhåndbok

3-bent komfort sammenleggbar krakk - Setehøyde 55 cm / 22 tommer - Kompakt, lett og enkel å ta med seg utendørs - Inkludert bæreveske - Maks belastning 225 kg

Skann QR-koden med smarttelefonen eller enheten din for å se videoinstruksjoner.

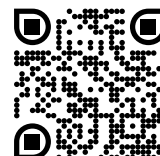

- Komfort sammenleggbar krakk følger deg uansett hvor du går.
- Den er kompakt nok til å ha med i vesken, og den kan enkelt brettes sammen.
- Du kan raskt forlenge beina og folde den ut, og den er stabil nesten hvor som helst.
- Komfortabel å sitte på – for en velfortjent hvile på den daglige turen utendørs, når du hagearbeider, fisker eller venter i den endeløse køen.
- Komfort sammenleggbar krakk bidrar til å beskytte ryggen, knærne og leddene.
- Komfort sammenleggbar krakk er tilgjengelig i forskjellige høyder med forskjellige setestørrelser; 55XL, 65XXL og 75XXL.



- 1 Brett ut avføringen.
- 2 Trekk ut beina og sørg for at de røde låseknappene er i riktig posisjon og at de er synlige etter at teleskopbeina er trukket ut.
- 3 Komfort-klappkrakken er nå klar til bruk i normal setehøyde.
- 4 For å brette sammen krakken etter bruk, trykk på den røde knappen og skyv teleskopbenet tilbake til sin ikke-utstrakte posisjon, og brett krakken sammen.



- 5 Komfort Folding-krakken tilbyr to setehøyder. Når du for eksempel arbeider i hagearbeid i lav høyde, kan du sitte på Comfort Folding-krakken uten å trekke ut teleskopbeina.



- ⑥ For å låse de nedre bena når Comfort Folding-krakken er brettet sammen, vri bena slik at de låses av gummiføttene som er tett inntil hverandre. For å bruke Comfort Folding-krakken, gjør det motsatte, og du kan låse opp de nedre bena.



- ⑦ Den kan enkelt brettes sammen for å få plass i bæreveksen. Klar for neste hvile og eventyr.

Hvis du har de «Steady»-stabilitetsstroppene til Comfort Folding Stool



De stabile stroppene øker sikkerheten og stabiliteten til Comfort Folding-krakken på myke overflater som sand eller myk jord.

- ① De tre festepunktene på Steady kan flyttes for å passe til størrelsen på din Comfort Folding-krakk.
- ② Juster festepunktene til riktig posisjon.
- ③ Sett føttene på krakken inn i lommene på Steady-en.



Feil bruk av Comfort-klappkrakken kan føre til personskade eller skade. Kontroller alltid Comfort-klappkrakken før bruk for å forsikre deg om at den røde låseknappen er i riktig posisjon.

Vær forsiktig når du sitter på Comfort Folding-krakken på ujevnt underlag. Unngå å legge press på bare ett eller to ben på Comfort Folding-krakken når du sitter.

Comfort Folding Stool er en svensk oppfinnelse og den eneste 3-beinte krakken i verden med teleskopben, patenter og varemerkebeskyttelse. Den er lett, kompakt og tilbyr overlegen sittekomfort.

Produsenter :

Scandinavian Touch AB
Lindhagsgatan 5C
531 40 Lidköping
SWEDEN
+4651025555